

数字负重足踝靴快速操作指南

账号注册



微信扫码注册账号



进入【我的】-【点击授权】



同意隐私政策后点击微信授权



根据自身情况填写注册信息，点击【注册】



首次注册后进入【训练】【去评估】补充信息



根据就诊情况补充信息完成初次注册

评估操作




进入【训练】页面点击【去评估】




初次需选择患侧脚与鞋子尺码后连接蓝牙



根据语音提示完成压力清零

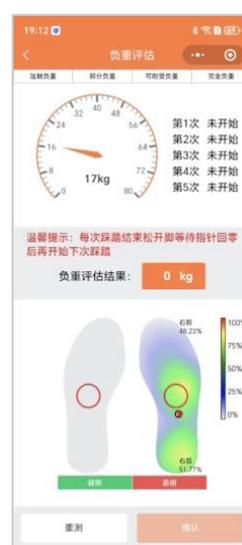

根据语音提示进行患侧负重评估

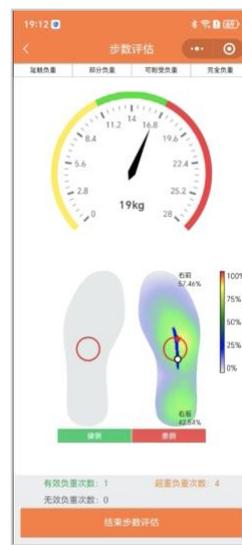

根据语音提示进行患侧步数评估



评估结束后在【首页】查看评估报告


训练操作




进入【训练】页面点击【去训练】



根据语音提示完成压力清零

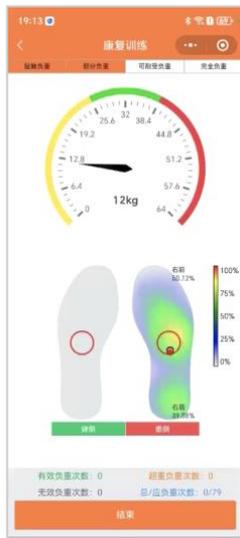

根据语音提示进行负重训练，每次踩踏控制指针指向绿色区间

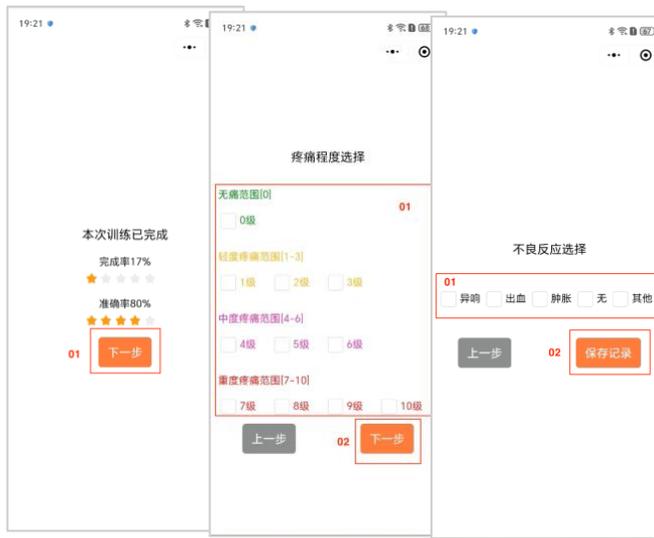

训练结束后根据自身感受填写【疼痛程度选择】和【不良反应选择】以保存完整训练记录



训练结束后在【首页】查看训练报告

补充说明:

保养方法: 可用清水擦拭污处。

温馨提示: 禁止在湿润、路滑、坑洼、高温等非适用环境中使用；使用过程中如出现疼痛或感觉异常，请立即停止使用。使用过程保持干燥，远离高温、高湿、高压或强电流、高磁场、腐蚀性或挥发性物质，如变电器变压器、电磁炉、微波炉、温箱烤箱等。

售后服务: 如发现产品质量问题，请及时与店铺客服或销售人员联系，以便更好地为您服务。

售后服务电话: 400-618-9886 或微信扫码添加售后服务专员



扫码添加售后服务专员



扫码查看完整操作视频



扫码了解更多骨康知识